



CHROMOPHARE E 520

operační svítidlo



CHROMOPHARE E 520 používá unikátní jednodílný polygonový reflektor, který vytváří jasné, rovnoměrné světlo.

Halogenové žárovky BRITe produkují daleko méně tepla než běžné halogenové žárovky. Velká manévrovatelnost, snadné používání, velké množství možností variant a schopnost kombinace s plochými panelovými displeji a dalším vybavením, to vše nabízí optimální podmínky pro každý operační tým.

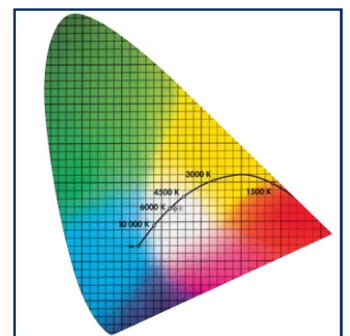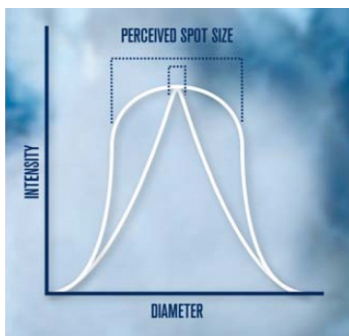

Provedení:

- na pojízdném stojanu
- nástěnné
- stropní

Výhody

- Účinnost a cenová efektivita halogenových žárovek BRITe (Berchtold Reflective Illumination Technology)
- Stálé světlo v celém světelném poli
- Optika umožňuje dvojitou hloubkovou prostoupení a dokonalé ovládání stínu
- Vysoce konfigurovatelné



Technická data

průměr světelné hlavy	58 cm
průměr polygonového reflektoru	46 cm
světelná intenzita	85.000 lx / 1 m
barevná teplota	4.500 °K
typ žárovky	150 W BRITe halogen
hloubka pole L1 + L2	138 cm
průměr pole	20 cm
zobrazovací index barev	94
životnost žárovky	min. 1.000 hodin
napětí	240 V (AC)
certifikace	CE