

LHH PLUS 10

svítidlo pro lékařské vyšetření a drobné chirurgické zákroky

Svítidlo LHH PLUS 10

Ize použít v ordinacích při vyšetření pacientů nebo při menších chirurgických výkonech, nebo všude tam, kde jsou nutné výjimečně dobré světelné podmínky.

Je vyrobeno podle nejnovější technologie a splňuje evropskou bezpečnostní normu EN 60601-1 a mezinárodní normu IEC 601-1.




Světelný zdroj - LHH PLUS 10 je osvětlení s 50 W halogenovou žárovkou s nízkým napětím. Nový světelný zdroj Solux s barevnou teplotou 4.700°K (denní světlo) v kombinaci se žárovkou 10° poskytuje optimální světelné podmínky pro drobné chirurgické zákroky.

Provedení - svítidlo je možné dodat na pojízdném stojanu, s úchytou na stůl (různé druhy úchytů), na zeď nebo na strop pomocí stropního závěsu se standardní délkou 100 cm. Na vyžádání lze dodat závěs až do délky 140 cm.


Hlavice

Speciálně konstruovaná, maximálně redukuje přehřátí povrchu. Žár absorbující a teplovzdorné sklo omezuje povrchovou teplotu vyzářovanou na objekt ve vzdálenosti 50 cm na 30°C, při okolní teplotě 24°C.

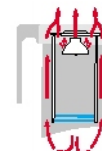

Polohovatelnost ramene

Rameno je přizpůsobeno potřebám a požadavkům pro použití v lékařství. Základem je celosvětově rozšířený a osvědčený patent firmy LUXO: "K" rameno s pružinovým vyvážením. Toto řešení umožňuje snadné umístění světla do požadované pozice, bez jakýchkoliv složitých utahovacích mechanismů.

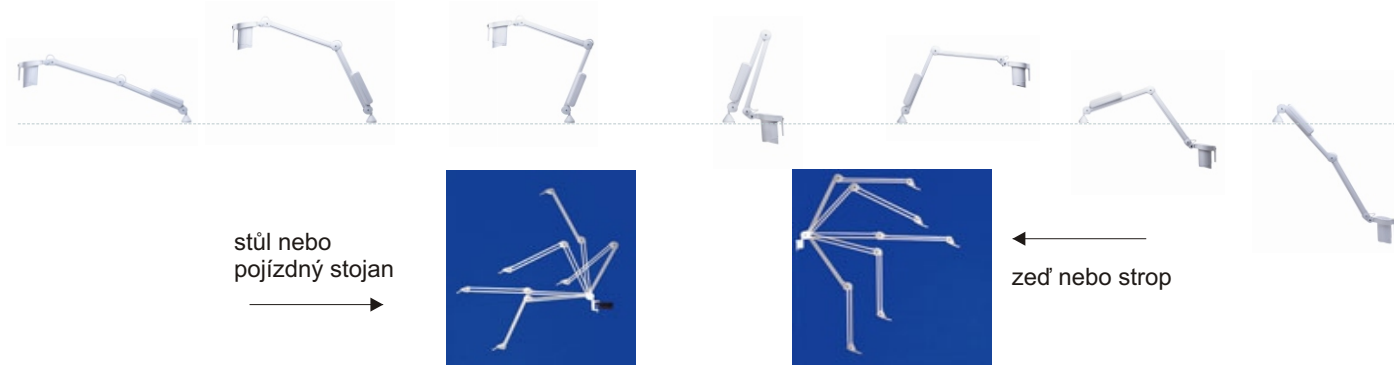

Světelný zdroj	úhel	lx / 50cm	pole	lx / 100cm	pole	bar. teplota	barev. index
Decostar IRC 24	24°	15.560 lx	270 mm	4.330 lx	520 mm	3.000 °K	98
Solux 24° (denní světlo)	24°	15.560 lx	270 mm	4.330 lx	520 mm	4.700 °K	98

Pro drobné chirurgické zákroky je vhodná halogenová žárovka 10°.