

Magnifique II lupa se zářivkovým osvětlením




Magnifique II je ideální nástroj pro lidi s poruchou zraku. Velmi tenký, průsvitný polykarbonátový rámeček čočky zajišťuje, že při přechodu z čočky na normální prohlížení a zpět se neztrácí oční kontakt s objektem.

Pohodlné prohlížení

Magnifique II má velkou obdélníkovou skleněnou čočku se 3,5 dioptriemi o rozměrech 175 x 108 mm, která umožňuje pohodlné prohlížení oběma očima. Pečlivě navržená čočka projektuje vysokou úroveň světla na pozorovaný předmět. Čočka má jedinečnou funkci snap-on / snap off, tzn. může být snadno vyměněna. Dalším zlepšením pohodlí při prohlížení je vestavěný elektronický předřadník. Nabízí okamžitý start bez blikání nebo stroboskopických efektů.

Velký vypínač byl navržen tak, aby poskytoval dobrou hmatovou zpětnou vazbu, což usnadňuje vyhledávání a ovládání.

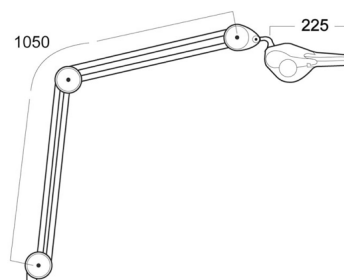

Materiál a barva

Ocelové rameno s plastovými kryty, plastová hlava.
Barva bílá.

Technologie a pohyb ramene

Výbornou flexibilitu zajišťuje systém vyvažovacích paralelních pružin, které bez další nutnosti jakéhokoliv utahování či povolování šroubů drží nastavenou polohu s dosahem 105 cm.

Varianty provedení

Základní verze je s úchytem na stůl.
Dále je možno objednat pojízdný stojan.

Technické parametry

Napájení	230-240 V, 50-60 Hz
Čočka	3,5 D; skleněná
Rozměr čočky	175 x 108 mm
Zdroj světla	zářivka 11 W
Délka ramene	105 cm
Dosah ramene, vč. hlavy	cca 130 cm
Hmotnost	3,9 kg
Možnosti uchycení	na stůl nebo na pojízdný stojan
Materiál	ocel a plast
Barva	bílá
Ochrana	IP 20

